


# REVYLINE RL 300

Ирригатор  
для полости рта



режимов  
давления

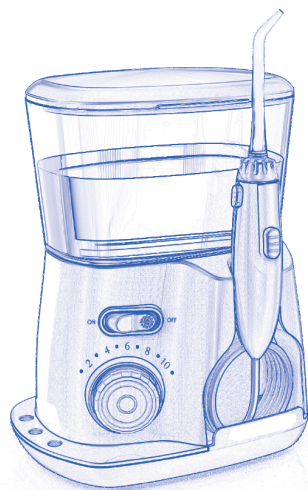

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Технология подачи водной струи под высоким давлением и в пульсирующем режиме позволяют ирригатору Revyline RL300 очищать поверхность зубных дуг и десен, а также пространство между зубами, недоступное для зубных щеток, и удалять большее количество зубного налета. Пульсирующая водная струя массирует десна, стимулирует кровоснабжение и улучшает их состояние.

### Меры предосторожности

Перед использованием ирригатора Revyline RL300 внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте правила безопасности. Это поможет вам максимально эффективно и комфортно использовать прибор.

### Для уменьшения риска получения электротравмы, соблюдайте следующие рекомендации:





1. Не берите штепсельную вилку влажными руками.
2. Не допускайте контакта корпуса прибора с водой или другими жидкостями.
3. Не используйте ирригатор во время принятия душа.
4. Если прибор упал в воду, не дотрагивайтесь до него и немедленно выдерните вилку из розетки.
5. Перед каждым использованием прибора всегда проверяйте целостность кабеля питания.

### Для уменьшения риска пожара, получения ожогов, электротравм и другого причинения вреда здоровью, соблюдайте следующие рекомендации:

1. Подключайте прибор только к электрической розетке, рассчитанной на соответствующую нагрузку.
2. Не направляйте струю воды под язык, в ухо, полость носа или другие уязвимые области. Мощная водная струя, генерируемая прибором, может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек на данных участках.
3. Используйте прибор в соответствии с инструкцией по применению и/или рекомендациями стоматолога.
4. Используйте дополнительные аксессуары и насадки только от ирригатора Revyline RL300.
5. Не вставляйте инородные предметы в разъемы и отверстия на корпусе прибора.
6. Не добавляйте в воду для ирригатора гранулированные вещества, например, соль. Они забивают насос и рукоятку ирригатора.
7. Храните сетевой шнур вдали от нагретых поверхностей.
8. Не используйте прибор на открытом воздухе или в местах применения кислорода или аэрозольных спреев.
9. Не используйте ополаскиватели для полости рта, содержащие в составе йод, отбеливающие агенты или масло чайного дерева.
10. Используйте для ирригации воду или раствор, рекомендованный стоматологом.
11. Не используйте при наличии открытых ран в полости рта или на языке.
12. Если вы находитесь в группе риска по состоянию здоровья и принимаете антибиотики перед проведением стоматологического лечения, перед применением ирригатора проконсультируйтесь со стоматологом.
13. Не снимайте пластиковый кончик с прозрачной насадки для очистки пародонтальных карманов. Если он потерялся, замените насадку на новую.
14. Не разрешайте детям играть с прибором.

### Включение устройства

1. Вставьте сетевой шнур в исправно работающую розетку.
2. Снимите крышку резервуара и сам резервуар с корпуса прибора. Наполните резервуар водой. Плотно закрепите резервуар на корпусе прибора (рис.1).
3. Вставьте насадку в центральный разъем красного цвета, расположенный в верхней части рукоятки. Цветное маркировочное кольцо насадки должно быть на одном уровне с верхней границей рукоятки (рис.2). Для вынимания насадки, нажмите и удерживайте кнопку извлечения насадки одновременно с извлечением ее из рукоятки (рис.3).
4. Для включения прибора нажмите кнопку включения-выключения питания (рис.4). Для выбора мощности напора водной струи поверните ручку регулировки давления по часовой стрелке (рис.5). После завершения использования прибора нажмите кнопку включения-выключения питания (рис.4). При этом давление воды в системе снизится до минимального значения, что позволит заново выбрать режим работы.
5. Наклонитесь к раковине, введите насадку ирригатора в полость рта и расположите ее кончик напротив зуба. Во время ирригации продвигайте насадку вдоль линии десны, последовательно очищая каждый зуб.

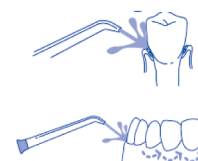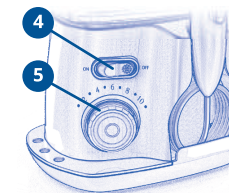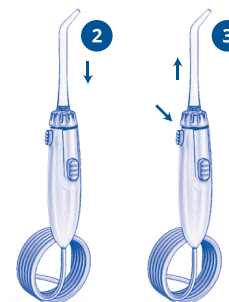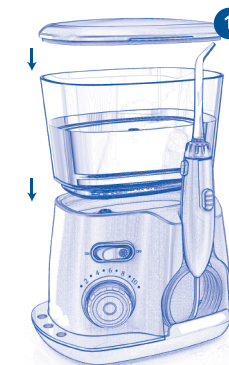

### Режим ирригации

Расположите насадку в полости рта таким образом, чтобы поток струи был направлен под углом 90° к линии десны. Чтобы вода не разбрызгивалась, неплотно сомкните губы. Во время ирригации вода естественным образом должна вытекать из полости рта в раковину. Для лучшего результата, вначале очистите боковые зубы (моляры), а затем передние. Продвигайте кончик насадки вдоль линии десны, задерживая его между зубами. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не очистите зубы изнутри и снаружи, а также все межзубные промежутки.

### Режим паузы

Для того, чтобы на время остановить работу ирригатора, нажмите кнопку паузы.

### После завершения ирригации

Выключите ирригатор. Удалите оставшуюся жидкость из резервуара. Извлеките шнур питания из розетки.

### Использование ополаскивателей для полости рта и других растворов

Вы можете использовать для ирригации различные ополаскиватели для полости рта и антисептические растворы. Для подбора раствора проконсультируйтесь у стоматолога.

**Внимание:** в некоторых антисептических растворах содержится спирт, который при длительном контакте с системой ирригатора может уменьшать его срок службы. После каждого использования специального раствора для ирригатора, тщательно промойте систему. Наполните резервуар достаточным количеством воды, направьте насадку по направлению к раковине и включите устройство. Прогоните через систему ирригатора всю воду в резервуаре. При этом вымываются остатки растворов из ирригатора, предохраняя систему от засорения.

### Очистка и уход

Перед очисткой ирригатора, отсоедините сетевой шнур от электрической розетки. При необходимости используйте для очистки мягкую ткань и мягкое неабразивное моющее средство.

Не погружайте насадки в кипящую воду. Для их очистки используйте спирт.

При поломке шланга, соединяющего рукоятку с корпусом прибора, обратитесь в сервисный центр для замены комплектующих.

### Гарантия

Если поломка ирригатора произошла в течение 7 дней после его покупки, обратитесь в сервисный центр. В случае подтверждения заводского дефекта, Вы можете вернуть ирригатор или починить/обменять его на новый.

Гарантия на прибор 2 года.

В течение 2 лет с момента покупки предоставляется бесплатное сервисное обслуживание ирригатора в сервисном центре. После этого срока обслуживание ирригатора осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как насадки.

Техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока.

### Насадки в комплекте



стандартная насадка 3 шт.



насадка для очистки языка для свежести дыхания



пародонтальная насадка для очистки пародонтальных карманов

### Руководство по устранению неполадок

Проблема	Возможная причина	Устранение
Мотор работает, но вода не подается	Резервуар для воды не плотно примыкает к корпусу прибора	Извлеките резервуар для воды и повторно закрепите его на корпусе прибора
Протечка между рукояткой и насадкой	Насадка не полностью вставлена	Извлеките насадку и повторно вставьте ее в разъем на рукоятке
Мотор не работает	Шнур питания не плотно вставлен в соответствующий разъем, расположенный в нижней части прибора	Повторно вставьте шнур питания в соответствующий разъем

### Распространенные проблемы и их решение

- **Не работает кнопка включения паузы.**  
**Решение:** Нажмите и удерживайте кнопку включения паузы для временной остановки подачи водной струи.
- **Не извлекается насадка.**  
**Решение:** Во время извлечения насадки нажмите и удерживайте кнопку высвобождения насадки, расположенную на рукоятке прибора.
- **Вода не подается или подается под низким давлением.**  
**Решение:** Надавите на резервуар для плотного соединения с корпусом прибора.
- **Сложности выбора уровня напора струи.**  
**Решение:** После включения прибора поверните ручку регулировки давления по часовой стрелке. Напор воды подбирается индивидуально. Для повышения эффективности ирригации используйте максимально мощный напор воды, не причиняющий вам дискомфорта.
- **Кровоточивость во время ирригации.**  
**Решение:** Кровоточивость является характерным симптомом воспаления десен. Не волнуйтесь. Прежде всего необходимо уменьшить уровень давления струи. Ирригатор удаляет зубной налет и бактерии из десен. При дальнейшем использовании кровоточивость прекратится.
- **Минимальный напор воды доставляет дискомфорт.**  
**Решение:** Большинству людей подходит уровень напора 2 и выше. При воспаленных и слабых деснах используйте пародонтальную насадку.
- **Как предотвратить разбрызгивание воды?**  
**Решение:** Во время ирригации не стойте вертикально прямо с широко открытым ртом. Наклонитесь по направлению к раковине, приоткройте рот. Вода будет естественным образом выливаться из полости рта.
- **Когда использовать ирригатор?**  
**Решение:** Используйте ирригатор после приема пищи и перед сном.

Если у вас остались вопросы, обратитесь в сервисный центр.

### Наименование прибора: ирригатор Revyline

Модель: RL-300

Напряжение: 100-240 В

Частота: 50 ~ 60 Гц

Входящая мощность: 12 Вт

Производство: Китай

Произведено по заказу ИП Обушенков М.А.,

г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 13, к. 1.

Изготовлено: Yaoxin Electronic Technology ( Shanghai ) Co.

Room 101, Tower 1, No. 1501, Jinsui Road, China (Shanghai)

Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China (Mainland)

## Гарантия 2 года.

## Гарантийный талон

Название организации .....

Дата продажи.....

Место для печати

8 (800) 700-53-60

www.revyline.ru